



1 MINUTE POUR
mes reins

GUIDE RAPIDE
D'UTILISATION



PRENDRE VOS MESURES

En 1 minute chrono

1



Allumer la tablette

Sélectionner
l'application Newcard

2

Sélectionner

Prendre mes mesures

3




Pour me déplacer à pied

- Je n'ai aucun problème
- J'ai des problèmes légers
- J'ai des problèmes modérés
- J'ai des problèmes sévères
- J'en suis incapable

**Répondre au questionnaire
de qualité de vie**

(à remplir une fois tous les 3 mois)

5 Pour transmettre votre tension

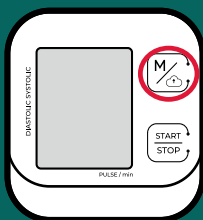

Appuyer sur le bouton



6



Vous peser

(balance posée sur
sol dur et stable)

TRANSMETTRE VOTRE BIOLOGIE

Sélectionner + Analyses biologiques sur la page d'accueil

Date d'analyse
26/09/2023

Fonctionnalité du rein

Créatininémie
mg/L

Urée
g/l

Continuer

**Compléter
le formulaire**

Merci d'ajouter les photos de
chaque page de vos résultats
d'analyses biologiques



Continuer

**Prendre en photo
le bilan biologique**

Valider et envoyer
Vous avez rempli 5 champs sur 25 et joint 0 photo

Biochimie
5 champs sur 14

Modifier

Paramètres cardiologiques
0 champs sur 2

Compléter

Hématologie
0 champs sur 9

Envoyer

**Valider et
Envoyer**

4 Bien prendre votre tension En 4 étapes



1. S'asseoir et passer le brassard autour du **bras gauche**.
2. Le **bandeau rouge** doit être placé à l'intérieur du pli du coude.
3. Placer le bras gauche sur une table, la paume de la main orientée vers le ciel.

4. Appuyer sur start

START
STOP

7

Comment respirez-vous
aujourd'hui ?



Comme
d'habitude

Plus essouffé
que d'habitude

Répondre
aux
2 questions

8



Vos données ont été
envoyées !

Envoyer
vos
données

9



Vos données sont
surveillées par votre
infirmier(ère)
Newcard et votre
néphrologue

INDIQUER UNE ABSENCE

Sélectionner

Déclarer une absence

sur la
page d'accueil



 Hospitalisation pour le rein	 Autre hospitalisation
 Raison personnelle	

Indiquer la raison
de l'absence



du
27/09/2023
au
04/10/2023
optionnelle
Envoyer mon absence

Sélectionner les dates
de l'absence et

Envoyer

VOTRE ACCOMPAGNEMENT THERAPEUTIQUE

Une séance obligatoire d'environ 15 minutes par téléphone
et d'autres séances peuvent être proposées pour :

Mieux connaître votre pathologie,

**Apprendre les comportements appropriés
durant votre télésurveillance,**

Vous impliquer dans votre parcours de soin.



CONTACTS



Téléphone
03 20 14 71 14



SMS
07 57 90 27 24



Mail
nephro@newcard.io

En cas d'urgence médicale :
appeler le 15

EN SAVOIR PLUS



newcard.io/infos1mpmr

**Nous vous remercions de conserver les emballages d'origine pour
transporter le kit ou nous le renvoyer.**

Ce dispositif médical de classe I est un produit de santé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (2019).
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation.

Création par NEWCARD SAS - Dernière modification : 15 novembre 2024 - Imprimé par : Pixartprinting
Ne pas jeter sur la voie publique – Référence : MPR-NTU-PAT-01.

CE



Parc du Moulin
391 Av. Clément Ader
59118 Wambrechies
www.newcard.fr